

seca 376

Pèse-bébé électronique
sans fil à plateau particulièrement
spacieux ③

DME intégrée



- Connexion possible au réseau grâce à la technologie sans fil seca 360° wireless.
- Amortissement réglable.
- Haute technologie de pesée seca avec graduation précise de 5 g.
- Fonctions TARE, HOLD, auto-HOLD et BMIF pour un confort particulier.
- Plateau particulièrement spacieux et ergonomique pour une pesée confortable et sécurisée.
- Convertible en station de mesure complète au moyen de la toise seca 233 disponible en option.

seca

La précision au service de la santé

seca 376 :

Bébé gigoteur ? Tout est sous contrôle !

Ergonomique, confortable et efficace. Voici les mots-clés désignant le pèse-bébé seca 376. En effet, son plateau particulièrement spacieux permet la pesée des bébés et des enfants en bas âge en position assise jusqu'à 20 kg. La fonction d'amortissement réglable associée à la touche HOLD permet d'obtenir des résultats de mesure rapides et précis. Gagnez du temps ! Plus besoin de noter les valeurs mesurées : grâce à la technologie sans fil seca 360° wireless, le pèse-bébé peut, si vous le souhaitez, transmettre directement les données vers l'imprimante sans fil seca 360° wireless ou vers le logiciel seca analytics 105 installé sur votre ordinateur.




La forme en coquille garantit un maximum de sécurité.

La forme en coquille du plateau de pesée du pèse-bébé seca 376 permet d'installer les bébés de manière sûre grâce à sa forme ergonomique spécialement conçue pour la pesée des bébés. Les bords relevés du plateau offrent un sentiment de sécurité en évitant une éventuelle chute du nourrisson.



La technologie sans fil seca 360° wireless permet au pèse-bébé seca 376 d'envoyer chaque valeur mesurée vers une imprimante sans fil seca disponible en option ou vers le logiciel installé sur votre ordinateur, et ce par simple activation d'une touche.

Les bords relevés du plateau de pesée offrent une protection particulière contre la chute.

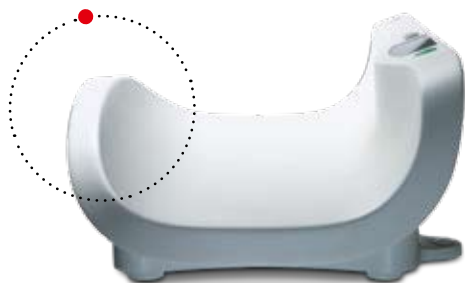

Les fonctions TARE, HOLD et BMIF accélèrent la pesée.

Le pèse-bébé seca 376 est synonyme d'efficacité : un appui prolongé sur la touche TARE vous permet de déterminer le poids net de l'enfant, même lorsqu'il est langé ou pesé sur un support doux. Il vous est également possible de déterminer la quantité de lait absorbée lors de l'allaitement en sélectionnant la fonction BMIF (Breast-Milk-Intake-Function). S'occuper d'abord du bébé et lire ensuite le résultat de la mesure ? C'est possible grâce à la touche HOLD. Et si vous le souhaitez, la fonction auto-HOLD peut être activée via le menu.

Une toise disponible en option permet de procéder simultanément à la pesée et à la mesure.

Autre avantage en matière d'efficacité et de gain de temps : le pèse-bébé seca 376 peut être équipé de la toise seca 233 disponible en option. Cet ensemble vous permettra de procéder simultanément à la pesée et à la mesure, et ce avec la qualité éprouvée seca.



Transmission sans fil des résultats sans imputation manuelle et sans erreur.

La technologie sans fil seca 360° wireless permet au seca 376 de transmettre toutes les valeurs mesurées à l'imprimante 360° wireless disponible en option. Grâce au logiciel seca analytics 105 connectable en réseau et à l'adaptateur sans fil 360° wireless USB seca 456, vous pourrez recevoir et exploiter les données sur votre ordinateur. Vous pourrez aussi les intégrer aux dossiers médicaux électroniques (DME) existants. Le seca 376 avec fonction DME intégrée est de ce fait prêt à affronter les dossiers médicaux numériques ainsi que toutes les exigences qui se poseront dans le futur. Pour plus d'informations sur la fonction DME, cliquez sur www.seca.com.

seca 376

Caractéristiques techniques

- Capacité : 20 kg
- Graduation : 5 g < 7,5 kg > 10 g
- Dimensions (LxHxP) : 620 x 190 x 358 mm
- Dimensions du plateau de pesage (LxHxP) : 615 x 130 x 275 mm
- Poids : 3,7 kg
- Alimentation : piles/secteur (en option)
- Transmission des données : technologie sans fil seca 360° wireless
- Fonctions : TARE, BMIF, HOLD, auto-HOLD, changement de sensibilité, amortissement réglable, extinction automatique
- En option : appuie-tête et pieds seca 418, toise seca 233, adaptateur secteur seca 447
- Classe d'étalonnage : M
- Compatibilité : imprimante sans fil 360° wireless advanced seca 466, imprimante sans fil 360° wireless seca 465, logiciel seca analytics 105, adaptateur sans fil 360° wireless USB seca 456